

# sfaturi practice

SERINGA AUTOMATĂ // ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI



HOSPICE CASA SPERANȚEI  
ÎN SPRIJINUL ÎNGRIJIRII PALIATIVE

## CE ESTE ȘI CUM ARATĂ SERINGA AUTOMATĂ?

Un dispozitiv portabil, acționat cu ajutorul unei baterii ce permite administrarea continuă a unei cantități constante de substanțe medicamentoase în unitatea de timp și administrarea concomitentă a mai multor medicamente.




## CARE SUNT AVANTAJELE FOLOSIRII SERINGII AUTOMATE?

- Permite administrarea medicamentelor în situația în care nu puteți înghiți sau aveți greață/ vărsături;
- Scade frecvența injecțiilor;
- Utilizarea la domiciliu devine mult mai confortabilă;
- Vă oferă mai multă libertate și control.

## TOTUȘI EXISTĂ ȘI DEZAVANTAJE

- La prima folosire aveți nevoie de sfat și instruire din partea asistentei medicale sau a medicului;
- Poate apărea o inflamație (roșeață, durere, umflătură) la nivelul la care se montează fluturașul;
- Este costisitoare, așadar rugămintea noastră este să aveți grijă de ea!

## UNDE SE MONTEAZĂ FLUTURAȘUL ATAȘAT SERINGII AUTOMATE?

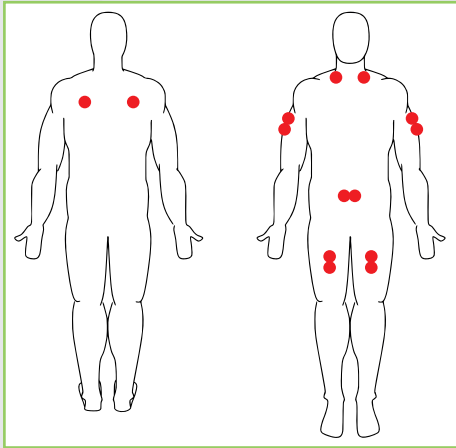

- Există câteva locuri speciale pe care vi le va indica asistenta medicală și pe care le puteți vedea în imaginea alăturată.
- **ATENȚIE!** Nu montați fluturașul:
  - în zone pe care s-a făcut recent radioterapie;
  - în orice zonă cu limfedem;
  - în zone cu infecție sau cu inflamație (roșeață, durere, umflătură);
  - în zona acoperită de tumoră;
  - la nivelul pliurilor cutanate (ex: încheieturi).

## CUM MONTAȚI SERINGA AUTOMATĂ?

Există câțiva pași pe care trebuie să-i urmați. Prima dată parcurgeți acești pași alături de asistenta medicală sau medicul dumneavoastră.

- 1 Alegeți locul unde doriți să montați fluturașul.
- 2 Umpleți seringă (aspirați în seringă conținutul fiolei/ fiolelor care trebuie administrate).
- 3 Măsurați lungimea coloanei de lichid din seringă și fixați rata de administrare pe aparat (număr de milimetri măsurați).
- 4 Conectați fluturașul la seringă și umpleți tubul acestuia.
- 5 Notați într-un carnetel data, ora, ce medicamente și câte fiole ați pus din fiecare în seringă. **ATENȚIE!** Peste exact 24 de ore (a doua zi la aceeași oră) ar trebui să o umpleți din nou.
- 6 Introduceți bateria în aparat.
- 7 Puneți seringă în aparat iar peste aparat puneți protecția de plastic.
- 8 Introduceți acul fluturașului sub piele și acoperiți-l cu plasturele transparent pe care vi-l indică asistenta medicală.
- 9 Apăsăți butonul de start.
- 10 Puneți aparatul în hăinuța lui de pânză și atașați-l la curea/ cordon.
- 11 Verificați dacă se aprinde beculețul de avertizare și se aude sunetul care însoțește injectarea substanței.

## CE AVEȚI DE FĂCUT DACĂ SERINGA NU FUNȚIONEAZĂ?

### VERIFICAȚI dacă:

- Bateria este consumată - în această situație ar trebui ca beculețul de avertizare să nu se mai aprindă și să nu mai auziți țiuitul specific. O baterie nouă poate fi folosită pentru aproximativ 100 de reîncărcări.
- Bateria este montată corect (+ la +, - la -).
- Ați apăsat butonul de START.
- Fluturașul este înfundat sau s-a produs strangularea tubului (seringa automată țiuie continuu), caz în care trebuie să schimbați fluturașul și locul de montare al acestuia.
- Seringa nu s-a golit și ar fi trebuit să o umpleți din nou.

CE AVEȚI DE FĂCUT DACĂ APARE SÂNGE PE  
FLUTURAȘ SAU SE FORMEAZĂ UMFLĂTURI  
LA LOCUL MONTĂRII FLUTURAȘULUI ȘI  
PIELEA SE ÎNROȘEȘTE?

Este necesară schimbarea atât  
a fluturașului, cât și a locului de  
montare al acestuia.

CE AVEȚI DE FĂCUT ÎN SITUAȚIA ÎN CARE  
APARE ORICE ALTĂ PROBLEMĂ CARE NU ESTE  
MENȚIONATĂ ÎN MATERIALUL PREZENTAT?

Nu ezitați să luați legătura cu  
echipa medicală!



**HOSPICE** CASA SPERANȚEI  
ÎN SPRIJINUL ÎNGRIJIRII PALIATIVE

[www.hospice.ro](http://www.hospice.ro)